



CARE SOLUTIONS

pour lits de soins Haelvoet



Haelvoet

CHOISISSEZ-VOUS

1. Protection latérale continue

Les galeries de protection d'une pièce offrent une sécurité optimale sur trois quarts ou sur toute la longueur du lit.

POUR...

2. Protection latérale divisée (amovible en option)

Les galeries de protection en deux parties offrent de la flexibilité et apportent de nombreux avantages dans la prévention des chutes, l'aide à la mobilité et au maintien de l'autonomie des résidents.

1. PROTECTION LATÉRALE CONTINUE

Les galeries de protection d'une pièce offrent une sécurité optimale sur trois quarts ou sur toute la longueur du lit.



POLLUX

Une distance réglementaire entre les **deux lattes** garantit que les galeries Pollux satisfont sans le moindre problème les normes les plus strictes. La commande à deux mains dispose d'une fonction de sécurité qui empêche l'abaissement involontaire de la galerie. Des lattes plus longues (+10 ou +20 cm) permettent d'utiliser la rallonge de lit intégrée.



TRIX

Trois lattes offrent une sécurité supplémentaire sur toute la longueur du lit. Un **système télescopique intégré** fait en sorte que les galeries Trix ferment toute la longueur du côté du lit. La commande à deux mains dispose d'une fonction de sécurité qui empêche l'abaissement involontaire de la galerie.



ATMOSPHERE

Les **galeries Atmosphère** offrent au patient une sécurité optimale, quelle que soit la position du lit. Elles se composent d'une seule pièce et peuvent être descendues en déverrouillant simplement un cliquet de sécurité.



PANNEAU LATÉRAL

Si aucune protection latérale n'est souhaitée, vous pouvez opter pour un panneau latéral continu **méla miné** ou **revêtu**. Le panneau latéral est au choix **fixe** ou **amovible**. Le choix s'applique toujours à l'ensemble du lit.



TRIX

système télescopique

Un **système télescopique intégré** fait en sorte que les galeries Trix ferment toute la longueur du côté du lit, même lorsque le lit a été étendu.

2. PROTECTION LATÉRALE DIVISÉE

Les galeries de protection en deux parties offrent de la flexibilité et apportent de nombreux avantages dans la prévention des chutes, l'aide à la mobilité et au maintien de l'autonomie des résidents.

POUR CE TYPE DE PROTECTION LATÉRALE, LES CÔTÉS DU LIT SONT DIVISÉS EN 4 POSITIONS.

- Les positions 1 et 2 sont situées à droite et à gauche du lit (côté tête).
- Les positions 3 et 4 sont situées à droite et à gauche du lit (côté pied).



La protection latérale peut être librement choisie pour chaque position



À CHAQUE POSITION, LE CHOIX DOIT ÊTRE FAIT ENTRE SÉCURITÉ OU FINITION AVEC PANNEAU.

- Vous pouvez choisir entre :
- une **galerie de protection Twin** pour sécurité
 - un **panneau latéral** qui cache le cadre du lit

Panneau latéral ou galerie de protection Twin

CHOIX ENTRE PROTECTION OU PANNEAU AMOVIBLE OU FIXE. LE CHOIX S'APPLIQUE TOUJOURS À L'ENSEMBLE DU LIT.


Les galeries Twin et les panneaux amovibles sont interchangeables et facilement amovibles sans outils.



Fixe



Amovible

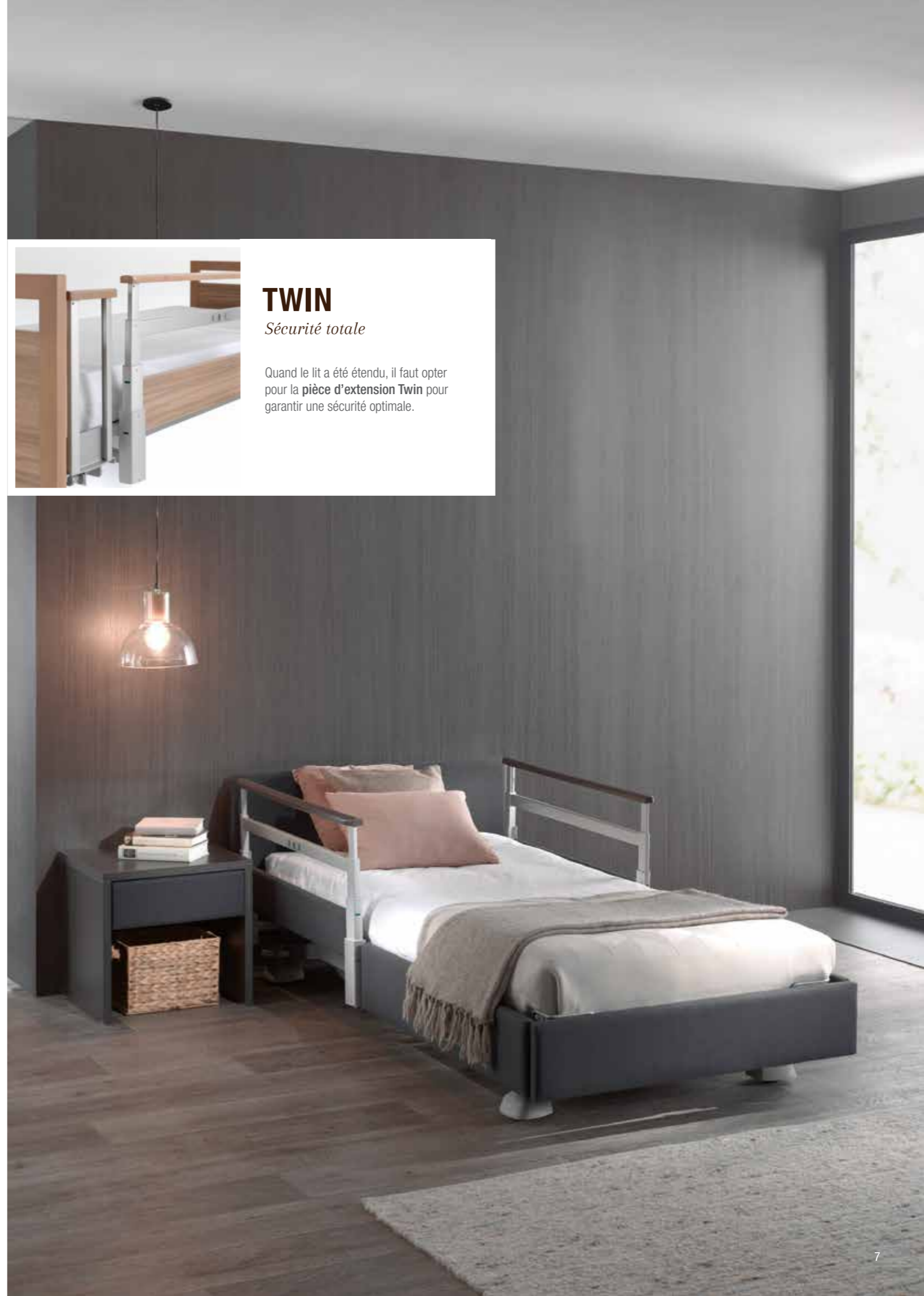

TWIN

Sécurité totale

Quand le lit a été étendu, il faut opter pour la **pièce d'extension Twin** pour garantir une sécurité optimale.

Galeries de protection Twin

La sécurité et la facilité d'utilisation prévalent dans la conception des galeries Twin.

EN UN COUP D'ŒIL

Lorsque les broches vertes sont visibles, les galeries de protection sont verrouillées dans leur position la plus haute.



AUCUN RISQUE DE PIÉGEAGE

Aucun risque de coincement des pieds dans la position la plus basse, conformément à la norme EN 60601-2-52.



POSITIONS



Position de sécurité (3 sections)



Position d'aide à la mobilité (2 sections)



Position de soutien (2,5 cm)




Position compacte

Comment choisir?

Suivez les étapes ci-dessous pour chaque position.

PROTECTION OU PAS DE PROTECTION ?

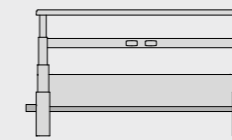


Galerie de protection Twin



Panneau latéral

01. FINITION TWIN

La galerie de protection Twin peut avoir une finition **revêtue** ou **mélaninée**. Dans des environnements hospitaliers, nous recommandons de choisir le Twin avec finition en **aluminium**.

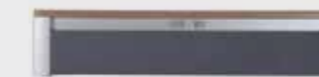

Twin Fabric




Twin Wood



Twin Alu avec panneau décor

01. FINITION PANNEAU LATÉRAL

Le panneau peut avoir une finition **revêtue** ou **mélaninée**.

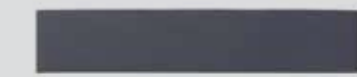

Panneau Fabric



Panneau Wood

02. FINITION BARRE SUPÉRIEURE

La barre supérieure peut être réalisée en bois ou en aluminium.



Barre en bois massif



Barre en aluminium

02. FLEXIBILITÉ

Choix entre version amovible ou fixe des panneaux latéraux. Le choix s'applique toujours à l'ensemble du lit.



Fixe



Amovible

03. FLEXIBILITÉ

Choix entre version amovible ou fixe des galeries de protection. Le choix s'applique toujours à l'ensemble du lit.



Fixe



Amovible

Combinaisons fréquemment choisies

CONFIGURATION 1 Protection ultime



CONFIGURATION 2 Protection de la partie tête



Attention: Si amovible, vous pouvez facilement passer à la configuration 1.

CONFIGURATION 3 Confort ultime



Attention: Si amovible, vous pouvez facilement passer aux configurations 1 & 2.

LES COMBINAISONS SONT INFINIES...
et c'est vous qui décidez

Le large choix de configurations et de matériaux vous permet d'adapter le lit parfaitement à vos souhaits et à vos besoins.

Panneaux de lit

La structure de nos lits permet de choisir parmi plusieurs types de panneaux. Chaque panneau est caractérisé par ses lignes claires et son souci du détail.

	HAUT	MOYEN	BAS
<i>Les panneaux medium et bas ne sont pas possibles avec les galeries de protection Pollux et Trix.</i>			
Type 1: Midea Panneau standard			
Type 2: Neo Panneau revêtu (fin)			
Type 3: Lusso Panneau revêtu (épais)			
Type 4: Eden Panneau en bois			
Type 5: Puro Panneau en bois			
Type 6: Felina Panneau en bois			
Type 7: Valentino Panneau en bois			

LES COMBINAISONS SONT INFINIES...
et c'est vous qui décidez

Le choix des panneaux de lit résulte du choix de la protection latérale. Les panneaux de tête et de pied peuvent être choisis librement parmi les options ci-dessus. Des combinaisons de panneaux hauts, moyens et bas sont également possibles.

ET SI...

(presque) tout était possible?

Finition en bois

Une finition en bois donne un aspect naturel et chaleureux au lit. Le bois est résistant, facile à nettoyer et, grâce au large choix de couleurs de notre collection standard, le lit peut être parfaitement intégré dans l'intérieur de votre établissement.

ou plutôt revêtue?

Les matières douces telles que le tissu et le similicuir augmentent le confort et offrent des possibilités supplémentaires pour personnaliser le lit. Les revêtements de la collection Haelvoet ont été soigneusement sélectionnés et répondent aux exigences les plus strictes en termes de facilité de nettoyage et de résistance.



Les Solutions Care sont possibles sur les lits Haelvoet suivants



VELINO
un ensemble harmonieux

Le lit Velino est un lit multifonctionnel à colonnes, réglable en hauteur, d'une utilisation simple, qui optimise le confort du patient. Le chariot complètement ouvert facilite le nettoyage.



LAGO
sécurité et confort

La sécurité et le confort vont de pair pour le lit Lago. Une position basse du lit de ± 25 cm limite le risque de chute et une hauteur de travail ergonomique de ± 80 cm garantit un soin efficace.



ARTENA
élégance et sûreté

Le lit Artena est un lit réglable en hauteur qui répond aux exigences élevées en termes de qualité, de design et de fonctionnalité auxquelles le patient et le personnel soignant sont confrontés au quotidien.



OLYMPIA
confort et style

Le lit de soins Olympia : sûr, durable et sécurisé. Un réglage en hauteur extrêmement stable combiné à une fonctionnalité élevée rendent ce lit véritablement polyvalent.

Tables de nuit Haelvoet: sélection



QUADRA & ATLAS
élégant et pratique

En option, la table de chevet peut être équipée d'une tablette repas inclinable Livia. Disponible en 6 versions:

- à une face: espace de rangement, espace libre, tiroir
- à double face: idem à une face, accessible des deux côtés
- avec réfrigérateur: réfrigérateur, espace libre, tiroir
- avec tiroir haut: tiroir haut, espace libre et tiroir
- version basse: espace de rangement et tiroir
- XLow: deux tiroirs

La table de nuit Atlas se distingue de la gamme Quadra par ses styles arrondis. Cette table de nuit est également disponible en 6 versions.



COSI
comme à la maison


La table de nuit Cosi crée un sentiment d'unité avec le lit, car les matériaux peuvent être parfaitement coordonnés.



BASSO
compact et gracieux

Basso est une table de nuit compacte qui s'intègre parfaitement dans la gamme des lits Lago.

- Basso existe en différentes versions:
- Version fermée ou ouverte
 - Avec tiroir revêtu ou en bois
 - Tiroir avec ou sans poignée

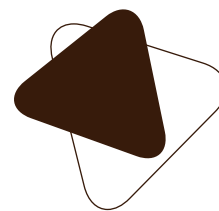

Haelvoet nv | **Belgique**
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95

info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Pays-Bas**
Schimminck 1
5301 KR Zaltbommel
T +31 (0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00

info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **France**
130, Boulevard de la Liberté
59000 Lille
T +33 (0) 3 20 02 71 71
F +33 (0) 3 20 88 18 91

info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Suisse**
Route de la Plaine 45
1580 Avenches
T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46

info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Roumanie**
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj
T +40 (0) 260 64 22 33
F +40 (0) 260 64 22 55

info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro